

Морозильники

сверхнизкотемпературные, морозильные лари -86 °С, DW-HW50HC, DW-HW138, DW-HW328, DW-HW668

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mgm@nt-rt.ru || сайт: <https://meling.nt-rt.ru/>



-86°C Ультранизкотемпературный Морозильный Ларь DW-HW138

- Микропроцессорный регулятор температуры
- Звуковая и визуальная сигнализация
- Эргономичный дизайн конструкции
- Высокоэффективная система охлаждения
- 138 л сверхнизкотемпературный морозильный ларь малого объема

Получен РУ на медицинское изделие в РФ, от 03 июля 2023 года, № РЗН2023/20502

Обзор

Микропроцессорная система контроля температуры

Морозильный ларь со сверхнизкой температурой Meling -86 °C, оснащенный микропроцессорным контроллером температуры, регулируемым от -40 °C до -86 °C, точность управления составляет 1 °C, цифровой дисплей температуры. Блокировка клавиатуры и защищенная паролем страница конфигурации, отложенный запуск и интервал безопасной остановки между перезапуском и прекращением работы.

Звуковая и визуальная сигнализация

Сигнализация высокой / низкой температуры, сигнализация сбоя питания, сигнализация низкого заряда батареи, сигнализация приоткрытой двери, сигнализация сбоя датчика, сигнализация сбоя системы и т. Д. С регистратором температуры USB, резервным аккумулятором длительного времени для работы регистратора и контроллера.

Эргономичный дизайн конструкции

Тип ящика, внутренняя часть из нержавеющей стали, внешняя панель из окрашенной стали, 4 ролика для удобства переноски. Верхняя дверь с ключевым замком. Технология двукратного вспенивания, конструкция с двойным уплотнением. Теплоизоляция толщиной 155 мм.

Высокоэффективная холодильная система

Импортный компрессор известного бренда, электродвигатель вентилятора с немецким EBМ. Уникальная циркуляция холода и технология униполярного компрессора с масляной смазкой. Китайская патентная технология смешанного хладагента, особенно конструкция одноступенчатого охлаждения.

Функции

Ведущий китайский производитель ультранизкотемпературных морозильных ларей
Микропроцессорный регулятор температуры
Звуковая и визуальная сигнализация
Дизайн конструкции, ориентированный на человека
Высокоэффективная холодильная система

Сфера применения

Сверхнизкотемпературный морозильник может использоваться в качестве лабораторного морозильника, ультранизкий медицинский морозильник и морозильник применяется в больницах, системах здравоохранения и профилактики эпидемий, научно-исследовательских институтах, биологической инженерии, лабораториях в колледжах и университетах, военно-промышленных предприятиях и т. д.

Характеристики

-86°C Ультранизкотемпературный морозильник

Модель	DW-HW138
Емкость (л)	138
Внутренний размер(Ш*Д*В) мм	490*470*582
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	1328*890*1025
Размер упаковки (Ш*Г*В) мм	1470*990*1241
СЗ/ГВт (кг)	200/262
Описание	
Диапазон температур	-40 ~ -86°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	-86°C
Климатический класс	H
Контроллер	Микропроцессор
Экран	Цифровой дисплей
Охлаждение	
Компрессор	1шт
Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Ручная
Хладагент	Газовая смесь
Толщина изоляции (мм)	152
Материалы	
Внешний материал	Холоднокатаный стальной лист
Внутренний материал	Нержавеющая сталь
Внешняя дверь	1 (Стальная пластина с напылением)
Дверной замок с ключом	Да
Пенообразующая крышка	2
Порт доступа	1шт. Ø 40 мм
Ролики	4
Регистрация данных/интервал/ время записи	USB/запись каждые 10 минут / 2 года
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура, высокая температура окружающей среды
Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи
Система	Отказ датчика, Перегрев конденсатора, Отказ встроенного регистратора данных USB, Ошибка связи
Аксессуар	
Стандарт	RS485, дистанционный контакт сигнализации
Параметры	Резервная система CO2



-86°C Сверхнизкотемпературный Морозильный Ларь DW-HW668

- Микропроцессорный регулятор температуры
- Звуковая и визуальная сигнализация
- Эргономичный дизайн конструкции
- Высокоэффективная система охлаждения
- 668L ультранизкотемпературный морозильный ларь

Получен РУ на медицинское изделие в РФ, от 03 июля 2023 года, №
РЗН2023/20502

Обзор

Микропроцессорная система контроля температуры

Морозильный ларь со сверхнизкой температурой Meling -86 °C, оснащенный микропроцессорным контроллером температуры, регулируемым от -40 °C до -86 °C, точность управления составляет 1 °C, цифровой дисплей температуры. Блокировка клавиатуры и защищенная паролем страница конфигурации, отложенный запуск и интервал безопасной остановки между перезапуском и прекращением работы.

Звуковая и визуальная сигнализация

Сигнализация высокой/низкой температуры, сигнализация сбоя питания, сигнализация низкого заряда батареи, сигнализация приоткрытой двери, сигнализация сбоя датчика и т. д. С регистратором температуры USB, резервным аккумулятором длительного времени для работы регистратора и контроллера.

Эргономичный дизайн конструкции

Морозильник ларного типа для лаборатории, внутренняя часть из нержавеющей стали, внешняя панель из окрашенной стали, 6 роликов для удобства переноски. Верхняя дверь с ключевым замком. Технология двукратного вспенивания, конструкция с двойным уплотнением. Теплоизоляция толщиной 130 мм.

Высокоэффективная холодильная система

Импортный компрессор известного бренда, электродвигатель вентилятора с немецким EBМ. Уникальная циркуляция холода и технология униполярного компрессора с масляной смазкой. Китайская патентная технология смешанного хладагента, особенно конструкция одноступенчатого охлаждения.

Функции

Ведущий китайский производитель ультранизкотемпературных морозильных ларей
Микропроцессорный регулятор температуры
Звуковая и визуальная сигнализация
Эргономичный дизайн конструкции
Высокоэффективная холодильная система
Морозильник лабораторного класса

Сфера применения

Сверхнизкотемпературный морозильник может использоваться в качестве лабораторного морозильника, ультранизкий медицинский морозильник и морозильник применяется в больницах, системах здравоохранения и профилактики эпидемий, научно-

исследовательских институтах, биологической инженерии, лабораториях в колледжах и университетах, военно-промышленных предприятиях и т. д.

Характеристики

-86 °C Ультранизкотемпературный морозильник

Модель	DW-HW668
Тип шкафа	Ларь
Емкость (л)	668
Внутренний размер(Ш*Д*В) мм	1200*815*666
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	2008*1180*1041
Размер упаковки (Ш*Г*В) мм	2145*1305*1234
СЗ/ГВт (кг)	352/509
Описание	
Диапазон температур	-40 ~ -86°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	-86°C
Климатический класс	H
Контроллер	Микропроцессор
Экран	Цифровой дисплей
Охлаждение	
Компрессор	2шт
Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Ручная
Хладагент	Газовая смесь
Толщина изоляции (мм)	130
Материалы	
Внешний материал	Холоднокатаный стальной лист
Внутренний материал	Нержавеющая сталь
Внешняя дверь	1 (Стальные пластины с напылением)
Дверной замок с ключом	Да
Пенообразующая крышка	3
Порт доступа	1шт. Ø 40 мм
Ролики	6
Регистрация данных/интервал/ время записи	USB/запись каждые 10 минут / 2 года
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура, высокая температура окружающей среды

Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи
Система	Сбой датчика, Перегрев конденсатора, Сбой встроенного регистратора данных USB, Ошибка связи
Аксессуар	
Стандарт	RS485, дистанционный контакт сигнализации
Параметры	Резервная система CO2



-86°C Сверхнизкотемпературный Морозильник Лабораторный Морозильник DW-HW328

- Микропроцессорный регулятор температуры
- Звуковая и визуальная сигнализация
- Эргономичный дизайн конструкции
- Высокоэффективная система охлаждения
- Ультранизкотемпературный морозильник для вакцин объемом 328 л

Получен РУ на медицинское изделие в РФ, от 03 июля 2023 года, №
РЗН2023/20502

Обзор

Микропроцессорная система контроля температуры

Сверхнизкотемпературный морозильник для вакцин Meling -86 °C оснащен микропроцессорным контроллером температуры, регулируемым от -40 °C до -86 °C, точность управления составляет 1 °C, цифровой дисплей температуры. Блокировка клавиатуры и защищенная паролем страница конфигурации, отложенный запуск и интервал безопасной остановки между перезапуском и прекращением работы.

Хорошо развитая звуковая и визуальная сигнализация

Сигнализация высокой / низкой температуры, сигнализация сбоя питания, сигнализация низкого заряда батареи, сигнализация отказа датчика и т. Д. С регистратором температуры USB, резервным аккумулятором длительного времени для работы регистратора и контроллера.

Эргономичный дизайн конструкции

Тип ящика, внутренняя часть из нержавеющей стали, внешняя панель из окрашенной стали, 6 роликов для удобства переноски. Верхняя дверь с ключевым замком. Технология двукратного вспенивания, конструкция с двойным уплотнением. Теплоизоляция толщиной 152 мм.

Высокоэффективная холодильная система

Импортный компрессор известного бренда, электродвигатель вентилятора с немецким EBM. Уникальная циркуляция холода и технология униполярного компрессора с масляной смазкой. Китайская патентная технология смешанного хладагента, особенно конструкция одноступенчатого охлаждения.

Функции

Ведущий китайский производитель ультранизкотемпературных морозильников для вакцин.

Микропроцессорный регулятор температуры

Звуковая и визуальная сигнализация

Дизайн конструкции, ориентированный на человека

Высокоэффективная холодильная система

Сфера применения

Сверхнизкотемпературный морозильник может использоваться в качестве лабораторного морозильника, ультранизкий медицинский морозильник и морозильник применяется в больницах, системах здравоохранения и профилактики эпидемий, научно-

исследовательских институтах, биологической инженерии, лабораториях в колледжах и университетах, военно-промышленных предприятиях и т. д.

Характеристики

-86 °C Ультранизкотемпературный морозильник

Модель	DW-HW328
Тип шкафа	Ларь
Емкость (л)	328
Внутренний размер(Ш*Д*В) мм	1200*470*582
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	2038*890*1025
Размер упаковки (Ш*Г*В) мм	2193*1003*1256
СЗ/ГВт (кг)	280/370
Описание	
Диапазон температур	-40 ~ -86°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	-86°C
Климатический класс	H
Контроллер	Микропроцессор
Экран	Цифровой дисплей
Охлаждение	
Компрессор	1шт
Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Ручная
Хладагент	Газовая смесь
Толщина изоляции (мм)	152
Материалы	
Внешний материал	Холоднокатаный стальной лист
Внутренний материал	Нержавеющая сталь
Внешняя дверь	1 (Стальная пластина с напылением)
Дверной замок с ключом	Да
Пенообразующая крышка	3
Порт доступа	1шт. Ø 40 мм
Ролики	6
Регистрация данных/интервал/ время записи	USB/запись каждые 10 минут/2 года
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура, высокая температура окружающей среды

Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи
Система	Отказ датчика, Перегрев конденсатора, Отказ встроенного регистратора данных USB, Ошибка связи
Аксессуар	
Стандарт	RS485, дистанционный контакт сигнализации
Параметры	Резервная система CO2



-86°C Небольшой Сверхнизкий Морозильник Для Лаборатории И Медицины DW-HW50HC

- Мини-морозильник сверхнизкой температуры для лабораторий и медицинских учреждений
- Микропроцессорная система контроля температуры
- Сверхбезопасная звуковая и визуальная сигнализация
- Эргономичный дизайн конструкции
- Вакуумная изоляция VIP Plus

Получен РУ на медицинское изделие в РФ, от 03 июля 2023 года, № РЗН2023/20502

Обзор

Небольшой морозильный ларь со сверхнизкой температурой Meling -86°C DW-HW50HC поставляется с небольшим корпусом для удобного использования. Он идеально подходит для хранения низкотемпературных научных экспериментов, плазмы, тунца, биоматериала и других биологических продуктов. Этот мини-морозильник может применяться в больницах, банках крови, университетских лабораториях, электронной промышленности, научно-исследовательских институтах, военной промышленности, пелагических рыболовных компаниях, санитарных и противозидемических службах. С помощью микропроцессорного контроллера температуры вы можете установить диапазон температур от -40 °C до -86 °C. Тип ящика и внутренний материал из нержавеющей стали позволяют легко чистить его. Этот небольшой сверхнизкотемпературный морозильник оснащен надежной системой сигнализации с блокировкой клавиатуры и доступом по паролю.

Микропроцессорная система контроля температуры

Оснащен системой микропроцессорного регулятора температуры, микропроцессорный регулятор температуры, от -40 °C до -86 °C можно свободно устанавливать. При температуре окружающей среды 32 °C вы можете установить самую низкую температуру как -86 °C, точность каждые 0,1 °C.

Супер безопасная система сигнализации

Этот сверхнизкотемпературный морозильник оснащен запираемой дверцей для предотвращения несанкционированного доступа. Он имеет функцию отложенного запуска и безопасного интервала остановки между перезапуском и завершением. Небольшой морозильник оснащен системой звуковой и визуальной сигнализации, которая включает сигнализацию о сбое питания, сигнализацию о высокой/низкой температуре, сигнализацию о сбое связи, сигнализацию о высокой температуре окружающей среды, сигнализацию о неисправности датчика и т. д.

Ориентация на человека

Этот мини-морозильник относится к типу ларей и поставляется с внутренним материалом из нержавеющей стали и внешним материалом из окрашенной стальной панели. А благодаря 4 роликам морозильник легко перемещается. Его передняя запирающаяся дверца обеспечивает вакуумную изоляцию VIP Plus, которая хорошо сохраняет однородность температуры и предотвращает перегрев. Конструкция с вспениванием представляет собой технологию двойного вспенивания с изоляцией из пеноматериала толщиной 110 мм, что обещает лучшие температурные характеристики.

Функции

Ведущий китайский производитель ультранизкотемпературных морозильных камер

Применяется высококачественный хладагент, не содержащий хлорфторуглеродов, и компрессор Secor.

Идеально снижает уровень шума и стабильно повышает температуру охлаждения до -86 °С.

Оснащен всемирно известным электродвигателем вентилятора Германии EBM.

Электропитание: 220В/50Гц 1 фаза, может быть изменено на 220В 60Гц или 110В 60Гц.


Сертификат: ISO9001, ISO14001, ISO13485. (CE, UL)

Опционально: стеллажи/боксы для морозильной камеры, резервная система CO2, панель с вакуумной изоляцией.

Характеристики



Сопоставления

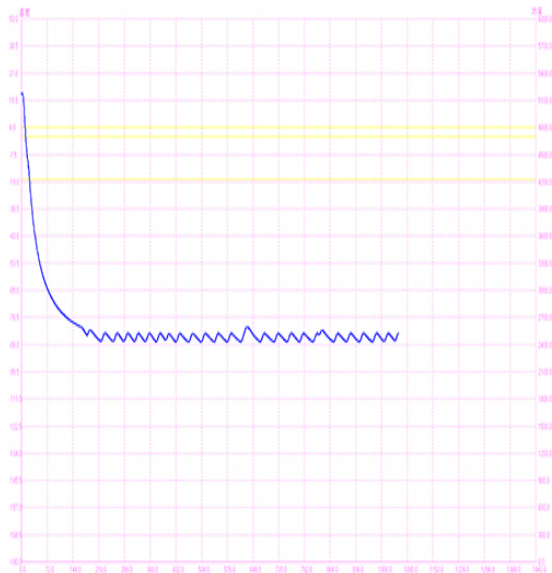

Сфера применения

Небольшой сверхнизкий морозильный ларь можно использовать в качестве лабораторного морозильника, сверхнизкий медицинский морозильник и морозильник подходит для применения в больницах, банках крови, системах здравоохранения и профилактики заболеваний, колледжах и университетах, исследовательских учреждениях, электронной промышленности, лабораториях в колледжах. и университеты, биологическая инженерия и многое другое.

-86 °С Ультранизкотемпературный морозильник

Модель	DW-HW50HC
Емкость (л)	50
Внутренний размер(Ш*Д*В) мм	430*305*425
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	650*606*1080
Размер упаковки (Ш*Г*В) мм	788*720*1283
СЗ (кг)	74/120
Описание	
Диапазон температур	-40 ~ -86°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	-86°C
Климатический класс	H
Контроллер	Микропроцессор

Экран	Цифровой дисплей
Охлаждение	
Компрессор	1шт
Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Ручная
Хладагент	ХК
Толщина изоляции (мм)	110
Материалы	
Внешний материал	Холоднокатаный стальной лист
Внутренний материал	Нержавеющая сталь
Дверной замок с ключом	Да
Внешний замок	По желанию
Порт доступа	1шт. Ø 25 мм
Ролики	4
Регистрация данных/интервал/ время записи	USB/запись каждые 10 минут / 2 года
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура, высокая температура окружающей среды
Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи
Система	Отказ датчика, Перегрев конденсатора, Отказ встроенного регистратора данных USB, Ошибка связи
Аксессуар	
Стандарт	RS485, дистанционный контакт сигнализации
Параметры	Самописец, резервная система CO2

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mgm@nt-rt.ru || сайт: <https://meling.nt-rt.ru/>