

Ультранизкие подстольные ULT- морозильники -86 °С, DW- HL50HC, DW-HL100HC

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mgm@nt-rt.ru || сайт: <https://meling.nt-rt.ru/>



Морозильник Сверхнизкой Морозильной Камеры -86°C Под Столешницей Для Лабораторного И Медицинского Морозильника DW-HL100HC

- Высокоточная система контроля температуры
- Мощная система охлаждения
- Эффективная система теплоизоляции
- Система звуковой и визуальной сигнализации
- Датчики температуры с платиновым резистором

Получен РУ на медицинское изделие в РФ, от 03 июля 2023 года, №
РЗН2023/20502

Обзор

Небольшая морозильная камера со сверхнизкой температурой Meling -86°C DW-HL100HC — это встраиваемая под прилавок морозильная камера для лабораторий и медицинских учреждений. Эта сверхнизкая морозильная камера оснащена высокоточной системой контроля температуры, обеспечивающей равномерность температуры в камере в диапазоне от -40°C до -86°C. Целенаправленное охлаждение морозильной камеры обеспечивает быстрое охлаждение. Он разработан с учетом потребностей человека, энергосбережения и защиты окружающей среды. В нем можно безопасно хранить материалы лабораторных исследований, фармацевтическое сырье и многое другое. Этот медицинский/лабораторный морозильник подходит для использования в банках крови, системах здравоохранения и профилактики заболеваний, больницах, колледжах и университетах, исследовательских учреждениях, электронной промышленности, лабораториях в колледжах и университетах, биологической инженерии, военных предприятиях, компаниях, занимающихся глубоководным рыболовством. ,

Высокоточная система контроля температуры

Морозильная камера DW-HL100HC со сверхнизкой температурой -86°C оснащена микропроцессорной системой контроля температуры, которая позволяет свободно устанавливать температуру внутри камеры в диапазоне от -40°C до -86°C. И это обеспечивает точность управления в 1°C.

Мощная система охлаждения

Небольшой морозильник DW-HL100HC оснащен компрессором Secor и известным вентилятором EMB, которые являются энергосберегающими и экологически безопасными. Большой ребристый конденсатор с расстоянием между ребрами менее 2 мм обеспечивает эффективный отвод тепла.

Эффективная система теплоизоляции

Эта мини-морозильная камера оснащена дверцей с вакуумной изоляцией VIP Plus и уплотнением. А шесть сторон шкафа изготовлены из высокоэффективных вакуумных изоляционных материалов, которые могут улучшить теплоизоляционные характеристики.

Звуковая и визуальная сигнализация

Лабораторный морозильник Meling имеет совершенную систему звуковой и визуальной сигнализации, включая сигнализацию о сбое датчика, сигнализацию о высокой/низкой температуре, сигнализацию о сбое питания, сигнализацию об открытии дверцы и т. д. Также он имеет функцию защиты от задержки включения и интервала остановки, обеспечивая надежную работу.

Функции

Ведущий китайский производитель ультранизкотемпературных морозильных камер

Высокоточная микрокомпьютерная система контроля температуры для легкой и точной установки температуры

Датчики температуры с платиновым резистором могут осуществлять более точный контроль температуры.

Высококачественная и простая в использовании панель управления для установки температурного диапазона от -40°C до -86°C с цифровой индикацией температуры с точностью до 1°C.

Запираемая дверь, блокировка клавиатуры и доступ по паролю предотвращают любой несанкционированный доступ и операции

Вертикальный морозильник с материалами из нержавеющей стали и внешними материалами из окрашенных стальных панелей, а также 4 ролика для удобства перемещения

Регулируемые 2-3 полки из нержавеющей стали с внутренней дверцей и двойным силиконовым уплотнителем

Электропитание: 220В/50Гц 1 фаза, может быть изменено на 220В 60Гц или 110В 50/60Гц.

Дополнительно: самописец, резервная система CO2, стеллажи/боксы для замораживания, удаленная система сигнализации.



Сфера применения


Подстольный сверхнизкий морозильник DW-HL100HC можно использовать в качестве лабораторного морозильника, сверхнизкого медицинского морозильника и морозильника глубокой заморозки, подходящий для использования в больницах, системах здравоохранения и профилактики заболеваний, исследовательских институтах, колледжах и университетах, электронной промышленности, биологической инженерии, лаборатории в колледжах и университетах, военных предприятиях, компаниях, занимающихся глубоководным рыболовством, и т. д.

Характеристики

-86 °C Ультранизкотемпературный морозильник

Модель	ДВ-HL100HC
Тип шкафа	Вертикальный
Емкость (л)	100
Внутренний размер(Ш*Д*В) мм	450*450*514
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	1066*742*820
Размер упаковки (Ш*Г*В) мм	1200*863*991
СЗ/ГВт (кг)	145/189
Описание	
Диапазон температур	-40 ~ -86°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	-86°C

Климатический класс	Н
Контроллер	Микропроцессор
Экран	Цифровой дисплей
Охлаждение	
Компрессор	1шт
Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Ручная
Хладагент	ХК
Толщина изоляции (мм)	Л:90, П:115
Материалы	
Внешний материал	Холоднокатаный стальной лист
Внутренний материал	Нержавеющая сталь
Полки	1 (нержавеющая сталь)
Дверной замок с ключом	Да
Внешний замок	Да
Порт доступа	1шт. Ø 25 мм
Ролики	4
Регистрация данных/интервал/ время записи	USB/запись каждые 10 минут / 2 года
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура, высокая температура окружающей среды
Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи
Система	Сбой датчика, ошибка связи, встроенный регистратор данных, сбой USB, сигнализация перегрева конденсатора, приоткрытая дверь
Аксессуар	
Стандарт	RS485, контакт удаленной сигнализации
Параметры	Резервная система CO2

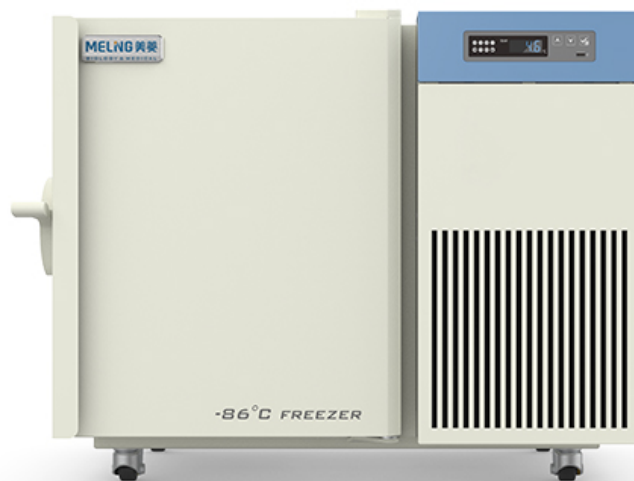

-86°C Сверхнизкая Морозильная Камера Под Столешницей Для Лабораторной И Медицинской Морозильной Камеры DW- HL50HC

- Мини-морозильник сверхнизкой температуры для лабораторий и медицинских учреждений
- Микропроцессорная система контроля температуры
- Сверхбезопасная звуковая и визуальная сигнализация
- Эргономичный дизайн конструкции
- Вакуумная изоляция VIP Plus

Получен РУ на медицинское изделие в РФ, от 03 июля 2023 года, №
РЗН2023/20502

Обзор

Сверхнизкотемпературный морозильник Meling Undercounter -86°C DW-HL50HC поставляется с небольшим корпусом для удобного использования. Он идеально подходит для хранения низкотемпературных научных экспериментов, плазмы, тунца, биоматериала и других биологических продуктов. Этот мини-морозильник может применяться в больницах, банках крови, университетских лабораториях, электронной промышленности, научно-исследовательских институтах, военной промышленности, пелагических рыболовных компаниях, санитарных и противозидемических службах. С помощью микропроцессорного контроллера температуры вы можете установить диапазон температур от -40 °C до -86 °C. Вертикальный тип и внутренний материал из оцинкованного стального листа (нержавеющая сталь опционально) облегчают очистку. Этот небольшой сверхнизкотемпературный морозильник оснащен надежной системой сигнализации с блокировкой клавиатуры и доступом по паролю.

Микропроцессорная система контроля температуры

Оснащен системой микропроцессорного контроллера температуры, позволяющей свободно устанавливать диапазон температур от -40 °C до -86 °C.

При температуре окружающей среды 32 °C вы можете установить самую низкую температуру -86 °C и убедиться, что точность составляет каждые 0,1 °C.

Супер безопасная система сигнализации

Эта сверхнизкотемпературная морозильная камера под столешницей оснащена запираемой дверью для предотвращения несанкционированного доступа. Он имеет функцию отложенного запуска и безопасного интервала остановки между перезапуском и завершением.

Небольшой морозильник оснащен системой звуковой и визуальной сигнализации, которая включает в себя сигнализацию о сбое питания, сигнализацию о высокой/низкой температуре, сигнализацию о приоткрытой двери, сигнализацию о сбое связи, сигнализацию о высокой температуре окружающей среды, сигнализацию о неисправности датчика и т. д.

Конструкция конструкции, ориентированная

на человека, а 4 ролика делают морозильную камеру удобной в обращении.

Его передняя запирающаяся дверца обеспечивает вакуумную изоляцию VIP Plus, которая хорошо сохраняет однородность температуры и предотвращает перегрев.

Вспененная конструкция с изоляцией из вспененного материала толщиной 110 мм обеспечивает лучшие температурные характеристики.

Функции

Ведущий китайский производитель ультранизкотемпературных морозильных камер

Применяется высококачественный хладагент, не содержащий хлорфторуглеродов, и компрессор Secor (Danfoss).

Идеально снижает уровень шума и стабильно повышает температуру охлаждения до -86 °С.

Оснащен всемирно известным электродвигателем вентилятора Германии EBM.

Электропитание: 220В/50Гц 1 фаза, может быть изменено на 220В 60Гц или 110В 60Гц.

Сертификат: ИСО9001, ИСО14001, ИСО13485, КЭ, УЛ

Дополнительно: удаленный контакт RS485, стеллажи/боксы для хранения, резервная система CO2, панель с вакуумной изоляцией



Сфера применения

Этот подпольный морозильник со сверхнизкой температурой DW-HL50HC можно использовать в качестве лабораторного морозильника, медицинского морозильника со сверхнизкой температурой и морозильной камеры глубокой заморозки, подходящий для применения в больницах, банках крови, системах здравоохранения и профилактики заболеваний, колледжах и университетах, исследовательских учреждениях, электронной промышленности, лаборатории в колледжах и университетах, биоинженерия и многое другое.

Характеристики

-86 °С Ультранизкотемпературный морозильник

Модель	DW-HL50HC
Тип шкафа	Вертикальный
Емкость (л)	50
Внутренний размер(Ш*Д*В) мм	305*425*430
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	951*700*757
Размер упаковки (Ш*Г*В) мм	1095*820*931
СЗ/ГВт (кг)	104/122 (деревянная упаковка)
Описание	
Диапазон температур	-40 ~ -86°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	-86°C
Климатический класс	H
Контроллер	Микропроцессор
Экран	Цифровой дисплей
Охлаждение	
Компрессор	1шт
Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Ручная
Хладагент	ХК
Толщина изоляции (мм)	110
Материалы	
Внешний материал	Холоднокатаный стальной лист
Внутренний материал	нержавеющая сталь

Полки	1 (нержавеющая сталь)
Дверной замок с ключом	Да
Внешний замок	Да
Замок	Да
Порт доступа	1шт. Ø 25 мм
Ролики	4
Регистрация данных/интервал/ время записи	USB/запись каждые 10 минут / 2 года
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура, высокая температура окружающей среды
Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи
Система	Неисправность датчика, приоткрытая дверь, сигнализация перегрева конденсатора, Ошибка связи
Опции Аксессуар	
Система	Резервная система CO2, RS485, контакт удаленной сигнализации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mgm@nt-rt.ru || сайт: <https://meling.nt-rt.ru/>