

Холодильники для хранения крови ХС-618L, ХС-168L, ХС-380L, ХС-170L, ХС-268L, ХС-630L, контейнеры для транспортировки крови ХС-90W

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mgm@nt-rt.ru || сайт: <https://meling.nt-rt.ru/>



Meling 4°C Холодильник для хранения крови XC-618L

- Конструкция с возвратным воздухом для точного контроля температуры
- Высокоэффективное охлаждение для безопасности крови
- 6 ящиков из нержавеющей стали
- Постоянная температура под интеллектуальным контролем
- 6 датчиков температуры

Обзор

Холодильник для хранения крови Meling 4°C XC-618L — это надежный холодильник для хранения крови, обеспечивающий безопасность цельной крови, плазмы крови, отсеков крови и образцов крови. Интеллектуальный постоянный контроль температуры обеспечивает

точность контроля температуры в пределах 2~6 °C внутри шкафа, что может гарантировать однородность температуры. Холодильник для хранения крови, оснащенный стеклянной дверцей с автоматическим размораживанием, обеспечивает безопасное хранение медицинских или лабораторных материалов.

Постоянная температура под интеллектуальным управлением

- Конструкция обратного воздуховода, обеспечивающая точность регулирования температуры внутри шкафа на уровне 0,1°C;
- Высокоточная компьютеризированная система контроля температуры, встроенные датчики температуры верхней/нижней зоны, температура окружающей среды, температура испарителя и управление работой, обеспечивающее безопасную и стабильную работу.

Система безопасности

- Совершенная система звуковой и визуальной сигнализации поставляется с функциями сигнализации для высокой температуры, низкой температуры, отказа датчика, дверь приоткрыта, авария и сбой питания.

Множественная защита безопасности

- Надежно открывайте холодильник с помощью отпечатка пальца, считывающей карты и электронного пароля для предотвращения злонамеренного проникновения, интеллектуального ввода данных и быстрой проверки состояния образцов.

ориентированный на человека

- Оборудован 6 ящиками из нержавеющей стали;
- Может вместить 312 мешков с кровью по 450 мл каждый.

Функции

Цифровой дисплей температуры высокой яркости, позволяющий отображать температуру до 0,1 °C.

Запираемая дверь с ключом для предотвращения открытия двери без разрешения.

Медная трубка с алюминиевым оребрением и высокоэффективный испаритель с воздушным охлаждением.

Звуковая и визуальная сигнализация с сигнализацией высокой/низкой температуры, сигналом сбоя питания, сигналом приоткрытой двери, сигналом сбоя питания и т. д.

Двухслойная стеклянная дверца с функцией автоматического размораживания обеспечивает однородность температуры.




Сфера применения

Подходит для использования в банках крови, больницах, системах здравоохранения и профилактики заболеваний, исследовательских институтах, колледжах и т. д. университеты, электронная промышленность, биологическая инженерия, лаборатории в колледжах и университетах, военные предприятия, компании, занимающиеся глубоководным рыболовством, и т. д.

Характеристики

4°C Холодильник для хранения крови

Модель	XC-618L
Тип	Вертикальный
Емкость (л)	618
Внутренний размер(Ш*Д*В) мм	685*690*1373
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	812*912*2140
Размер упаковки (Ш*Г*В) мм	1020*920*1978
Вес (кг)	204/257
Описание	
Диапазон температур	2~6°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	4°C
Климатический класс	H
Контроллер	Микропроцессор
Экран	Интеллектуальный сенсорный экран высокой четкости
Охлаждение	
Компрессор	1шт
Метод охлаждения	Воздушное охлаждение
Режим разморозки	автоматический
Хладагент	R290
Толщина изоляции (мм)	55
Материалы/конструкция	
Внешний материал	PCM
Внутренний материал	Нержавеющая сталь (дополнительно алюминиевая пластина с напылением)
Ящики	6 (ящик из нержавеющей стали)
Дверной замок с ключом	Да
Порт доступа	1шт. Ø 25 мм
Ролики	4 (2 ролика с тормозом)
Регистрация данных/ интервал/время записи	USB/запись каждые 5 минут / 10 лет
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура, высокая температура окружающей среды
Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи
Система	Неисправность датчика, Приоткрытая дверь, Перегрев конденсатора, Неисправность встроенного USB- регистратора данных
Аксессуары	
Стандарт	RS485, контакт удаленной сигнализации



Meling 4°C Холодильник для хранения крови XC-

168L

- Конструкция с возвратным воздухом для точного контроля температуры
- Высокоэффективное охлаждение для безопасности крови
- 3 ящика из нержавеющей стали
- 9 корзин с кровью
- Постоянная температура под интеллектуальным контролем

Обзор

Холодильник для хранения крови Meling 4°C XC-168L — это надежный холодильник для хранения крови, обеспечивающий безопасность цельной крови, плазмы крови, отсеков крови и образцов крови. Интеллектуальный постоянный контроль температуры обеспечивает

точность контроля температуры в пределах 2~6 °C внутри шкафа, что может гарантировать однородность температуры. Холодильник для хранения крови, оснащенный стеклянной дверцей с автоматическим размораживанием, обеспечивает безопасное хранение медицинских или лабораторных материалов.

Постоянная температура под интеллектуальным управлением

- Конструкция обратного воздуховода, обеспечивающая точность регулирования температуры внутри шкафа на уровне 0,1°C;
- Высокоточная компьютеризированная система контроля температуры, встроенные датчики температуры верхней/нижней зоны, температура окружающей среды, температура испарителя и управление работой, обеспечивающее безопасную и стабильную работу.

Система безопасности

- Совершенная система звуковой и визуальной сигнализации поставляется с функциями сигнализации для высокой температуры, низкой температуры, отказа датчика, дверь приоткрыта, авария и сбой питания.

Высокоэффективное охлаждение

- Усовершенствованная конструкция воздушного охлаждения, точный контроль температуры, обеспечение безопасности крови;
- Внутренний контейнер из нержавеющей стали, испаритель из медных труб, мощное охлаждение.

ориентированный на человека

- Оборудован 3 ящиками из нержавеющей стали;
- Может вместить 117 мешков с кровью по 400 мл каждый.

Функции

Цифровой дисплей температуры высокой яркости, позволяющий отображать температуру до 0,1 °C.

Запираемая дверь с ключом для предотвращения открытия двери без разрешения.

Медная трубка с алюминиевым оребрением и высокоэффективный испаритель с воздушным охлаждением.

Звуковая и визуальная сигнализация с сигнализацией высокой/низкой температуры, сигналом сбоя питания, сигналом приоткрытой двери, сигналом сбоя питания и т. д.

Двухслойная стеклянная дверца с функцией автоматического размораживания обеспечивает однородность температуры.

Жесткая полиуретановая изоляция, не содержащая фреонов, чтобы избежать избыточного нагрева.

Сфера применения

Подходит для использования в банках крови, больницах, системах здравоохранения и профилактики заболеваний, исследовательских институтах, колледжах и т. д. университеты, электронная промышленность, биологическая инженерия, лаборатории в колледжах и университетах, военные предприятия, компании, занимающиеся глубоководным рыболовством, и т. д.

Характеристики

4°C Холодильник для хранения крови

Модель	XC-168L
Тип шкафа	Вертикальный
Емкость (л)	168
Внутренний размер(Ш*Д*В) мм	525*550*744
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	654*774*1330
Размер упаковки (Ш*Г*В) мм	700*837*1492
С3/ГВт (кг)	116/144
Описание	
Настройка температуры	2~6°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Климатический класс	Н
Контроллер	Микропроцессор
Экран	Интеллектуальный сенсорный экран высокой четкости
Охлаждение	
Компрессор	1шт
Метод охлаждения	Воздушное охлаждение
Режим разморозки	автоматический
Хладагент	R290
Толщина изоляции (мм)	П/Л:55,У:55,Д:55,Б:50
Материалы/конструкция	
Внешний материал	PCM
Внутренний материал	Нержавеющая сталь
Ящики	3 (ящики из нержавеющей стали)
Дверной замок с ключом	Да
Порт доступа	1шт. Ø 25 мм
Ролики	4 (2 ролика с тормозами)
Регистрация данных/интервал/ время записи	USB/запись каждые 5 минут / 10 лет
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура, высокая температура окружающей среды
Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи
Система	Неисправность датчика, Приоткрытая дверь, Перегрев конденсатора, Ошибка связи
Аксессуары	
Параметры	Уставный регистратор
Стандарт	RS485, контакт удаленной сигнализации



Meling 4°C Холодильник для хранения крови XC-

380L

- Конструкция с возвратным воздухом для точного контроля температуры
- Высокоэффективное охлаждение для безопасности крови
- 5 полок с покрытием погружением с полосками для этикеток
- 15 рамок для пакетов с кровью с покрытием погружением
- Постоянная температура под интеллектуальным контролем

Обзор

Холодильник для хранения крови Meling 4°C XC-380L — это надежный холодильник для хранения крови, обеспечивающий безопасность цельной крови, плазмы крови, отсеков крови и образцов крови. Интеллектуальный постоянный контроль температуры обеспечивает точность контроля температуры в пределах 2~6 °C внутри шкафа, что может гарантировать однородность температуры. Холодильник для хранения крови, оснащенный стеклянной дверцей с автоматическим размораживанием, обеспечивает безопасное хранение медицинских или лабораторных материалов.

Постоянная температура под интеллектуальным контролем

- Конструкция воздуховода обратного воздуха, обеспечивающая точность контроля температуры $\pm 1^{\circ}\text{C}$ внутри шкафа;
- Высокоточная компьютеризированная система контроля температуры, встроенные датчики температуры верхней/нижней зоны, температуры окружающей среды, температуры испарителя и контроля работы, обеспечивающие безопасную и стабильную работу.

Система безопасности

Совершенная система звуковой и визуальной сигнализации поставляется с функциями сигнализации для высокой температуры, низкой температуры, неисправности датчика, открытия двери и сбоя питания.

Высокоэффективное охлаждение · Усовершенствованная конструкция воздушного охлаждения, точный контроль температуры, обеспечение сохранности крови · Внутренний контейнер из нержавеющей стали, испаритель из медных труб, мощное охлаждение

Система охлаждения

- Оборудована фирменным высокоэффективным компрессором, двигателем вентилятора EBM, обеспечивающим эффективную энергию и низкий уровень шума.
- Высокоточная компьютеризированная система контроля температуры, встроенные датчики температуры верхней/нижней зоны, температуры окружающей среды, температуры испарителя и контроля работы, обеспечивающие безопасную и стабильную работу

Автоматическая разморозка

- Конструкция возвратного воздуховода, обеспечивающая точность контроля температуры $\pm 1^{\circ}\text{C}$ внутри шкафа;
- Оснащен функцией автоматической разморозки, принудительной разморозки.

Гуманизированный дизайн

- Оборудован 5 полками для погружения с полосками для этикеток;
- 15 рамок мешков с кровью с покрытием погружением (дополнительная рама из нержавеющей стали).

Функции

Цифровой дисплей температуры высокой яркости, позволяющий отображать температуру до 0,1 °C.

Запираемая дверь с ключом для предотвращения открытия двери без разрешения.

Медная трубка с алюминиевым оребрением и высокоэффективный испаритель с воздушным охлаждением.

Звуковая и визуальная сигнализация с сигнализацией высокой/низкой температуры, сигналом сбоя питания, сигналом приоткрытой двери, сигналом сбоя питания и т. д.

Двухслойная стеклянная дверца с функцией автоматического размораживания обеспечивает однородность температуры.

Жесткая полиуретановая изоляция, не содержащая фреонов, чтобы избежать избыточного нагрева.




Сфера применения

Холодильник для хранения крови подходит для хранения цельной крови, тромбоцитов, эритроцитов, биологических продуктов, вакцин, лекарств, реагентов и т. д.; Подходит для использования в банках крови, больницах, научно-исследовательских учреждениях, центрах профилактики и контроля заболеваний и т. д.

Характеристики

4°Холодильник для хранения крови

Модель	XC-168L
Тип шкафа	Вертикальный
Емкость (л)	380
Внутренний размер(Ш*Д*В) мм	604*494*1310
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	721*660*1999
СЗ/ГВт (кг)	134/154
Описание	
Настройка температуры	2~6°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	4°C
Климатический класс	Н
Контроллер	Микропроцессор
Экран	Цифровой дисплей
Охлаждение	
Компрессор	1шт
Метод охлаждения	Воздушное охлаждение
Режим разморозки	автоматический
Хладагент	R290
Материалы/конструкция	
Внешний материал	PCM
Внутренний материал	Нержавеющая сталь
Ящики	5 (стальная проволочная полка с покрытием)
Дверной замок с ключом	Да
Порт доступа	1шт. Ø 25 мм
Ролики	4 (2 ролика с тормозом)
Регистрация данных/интервал/время записи	USB/запись каждые 10 минут / 2 года
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура, высокая температура окружающей среды
Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи
Система	Ошибка датчика, приоткрытая дверь, перегрев конденсатора, сбой встроенного USB-регистратора данных
Аксессуары	
Система	Контакт дистанционной сигнализации, RS485
По желанию	Самописец



Meling New Product 4°C Холодильник для хранения крови XC-170L

- Постоянная температура под интеллектуальным управлением
- Высокоэффективное охлаждение для безопасности крови
- 3 полки для покрытия погружением с полосками для этикеток
- Усовершенствованная конструкция воздушного охлаждения
- Магазин 90 пакетов 450 мл пакетов с кровью

Холодильник для хранения крови Meling 4°C XC-170L — это надежный холодильник для хранения крови, обеспечивающий безопасность цельной крови, плазмы крови, отсеков крови и образцов крови. Интеллектуальный постоянный контроль температуры обеспечивает

точность контроля температуры в пределах 2~6 °C внутри шкафа, что может гарантировать однородность температуры. Холодильник для хранения крови, оснащенный стеклянной дверцей с автоматическим размораживанием, обеспечивает безопасное хранение медицинских или лабораторных материалов.

Постоянная температура под интеллектуальным контролем

- Конструкция воздуховода обратного воздуха, обеспечивающая точность контроля температуры $\pm 1^{\circ}\text{C}$ внутри шкафа;
- Высокоточная компьютеризированная система контроля температуры, встроенные датчики температуры верхней/нижней зоны, температуры окружающей среды, температуры испарителя и контроля работы, обеспечивающие безопасную и стабильную работу.

Система безопасности

Совершенная система звуковой и визуальной сигнализации поставляется с функциями сигнализации для высокой температуры, низкой температуры, отказа датчика, приоткрытой двери, сбоя питания и т. д.

Высокоэффективное охлаждение · Усовершенствованная конструкция воздушного охлаждения, точный контроль температуры, обеспечение сохранности крови · Внутренний контейнер из нержавеющей стали, испаритель из медных труб, мощное охлаждение

Система охлаждения

- Оборудована фирменным высокоэффективным компрессором, двигателем вентилятора EBM, обеспечивающим эффективную энергию и низкий уровень шума.
- Высокоточная компьютеризированная система контроля температуры, встроенные датчики температуры верхней/нижней зоны, температуры окружающей среды, температуры испарителя и контроля работы, обеспечивающие безопасную и стабильную работу

Автоматическая разморозка

- Дополнительно 3 полки и 9 рамок для мешков с кровью, вмещающих 90 мешков с кровью по 450 мл каждый;
- Оснащен 3 стальными проволочными ящиками с полосками для этикеток (нержавеющая сталь не является обязательной)

Гуманизированный дизайн

- Оборудован 5 полками для погружения с полосками для этикеток;
- 9 рамок мешков с кровью с покрытием погружением (дополнительная рама из нержавеющей стали).

Функции

1-дюймовый цифровой дисплей температуры высокой яркости, позволяющий отображать температуру до 0,1 °C.

Запираемая дверь с ключом для предотвращения открытия двери без разрешения. Медная трубка с алюминиевым оребрением и высокоэффективный испаритель с воздушным охлаждением.

Звуковая и визуальная сигнализация с сигнализацией высокой/низкой температуры, сигналом сбоя питания, сигналом приоткрытой двери, сигналом сбоя питания и т. д.
Двухслойная стеклянная дверца с функцией автоматического размораживания обеспечивает однородность температуры.
Жесткая полиуретановая изоляция, не содержащая фреонов, чтобы избежать избыточного нагрева.

 Сфера применения


Кровь Кровяной холодильник подходит для хранения цельной крови, тромбоцитов, эритроцитов, биологических продуктов, вакцин, лекарств, реагентов и т. д.; Подходит для использования в банках крови, больницах, научно-исследовательских учреждениях, центрах профилактики и контроля заболеваний и т. д.

Характеристики

4°C Холодильник для хранения крови

Модель	XC-170L
Тип шкафа	Вертикальный
Емкость (л)	170
Внутренний размер(Ш*Д*В) мм	525*550*744
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	654*774*1330
Размер упаковки (Ш*Г*В) мм	700*837*1492
СЗ/ГВт (кг)	106/135
Описание	
Диапазон температур	2~6°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Климатический класс	H
Контроллер	Микропроцессор
Экран	Цифровой дисплей
Охлаждение	
Компрессор	1шт
Метод охлаждения	Воздушное охлаждение
Режим разморозки	автоматический
Хладагент	R290
Толщина изоляции (мм)	П/Л:55,У:55,Б:50
Материалы/конструкция	
Внешний материал	PCM
Внутренний материал	Нержавеющая сталь
Ящики	3 (стальная проволочная полка с покрытием)
Дверной замок с ключом	Да
Порт доступа	1шт. Ø 25 мм
Ролики	4 (2 ролика с тормозами)

Регистрация данных/интервал/ время записи	USB/запись каждые 10 минут / 2 года
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура, высокая температура окружающей среды
Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи
Система	Отказ датчика, Приоткрытая дверь, Перегрев конденсатора, Отказ встроенного USB-регистратора данных, Ошибка связи
Аксессуары	
Параметры	Уставный регистратор
Стандарт	RS485, контакт удаленной сигнализации



4°C Высокопроизводительный Холодильник ХС-268L для хранения крови

- Конструкция с возвратным воздухом для точного контроля температуры
- Высокоэффективное охлаждение для безопасности крови
- 5 полок с покрытием погружением с полосками для этикеток
- 15 рамок для пакетов с кровью с покрытием погружением
- Постоянная температура под интеллектуальным контролем

Компания Meling является ведущим китайским производителем холодильников для банков крови. 4°C Холодильник для хранения крови XC-268L представляет собой надежный холодильник для хранения крови, обеспечивающий безопасность цельной крови, плазмы крови, отсеков крови и образцов крови. Интеллектуальный постоянный контроль температуры обеспечивает точность контроля температуры в пределах 2~6 °C внутри шкафа, что может гарантировать однородность температуры. Холодильник для хранения крови, оснащенный стеклянной дверцей с автоматическим размораживанием, обеспечивает безопасное хранение медицинских или лабораторных материалов. Что делает этот холодильник для крови выдающимся, так это то, что он соответствует требованиям AABB и CDC для хранения крови или превосходит их. Чтобы обеспечить вам высокоэффективное хранение, этот холодильник для хранения крови оснащен 5 полками для погружения и 15 корзинами из нержавеющей стали со 150 пакетами емкостью 450 мл.

Постоянная температура под интеллектуальным контролем

- Конструкция воздуховода обратного воздуха, обеспечивающая точность контроля температуры $\pm 1^{\circ}\text{C}$ внутри шкафа;
- Высокоточная компьютеризированная система контроля температуры, встроенные датчики температуры верхней/нижней зоны, температуры окружающей среды, температуры испарителя и контроля работы, обеспечивающие безопасную и стабильную работу.

Система безопасности

Совершенная система звуковой и визуальной сигнализации поставляется с функциями сигнализации для высокой температуры, низкой температуры, отказа датчика, приоткрытой двери, сбоя питания и т. д.;

Высокоэффективное охлаждение · Усовершенствованная конструкция воздушного охлаждения, точный контроль температуры, обеспечение безопасности крови · Внутренний контейнер из нержавеющей стали, испаритель из медных труб, мощное охлаждение.

Система охлаждения

- Оборудован фирменным высокоэффективным компрессором, двигателем вентилятора EBM, обеспечивающим эффективную энергию и бесшумность;
- Высокоточная компьютеризированная система контроля температуры, встроенные датчики температуры верхней/нижней зоны, температуры окружающей среды, температуры испарителя и контроля работы, обеспечивающие безопасную и стабильную работу.

Автоматическая разморозка

- Конструкция возвратного воздуховода, обеспечивающая точность контроля температуры $\pm 1^{\circ}\text{C}$ внутри шкафа;
- Оснащен функцией автоматической разморозки, принудительной разморозки.

Гуманизированный дизайн

- Оборудован 5 полками для погружения с полосками для этикеток;
- 20 рамок для мешков с кровью с погружением (дополнительная рама из нержавеющей стали), вмещающих 220 мешков с кровью по 450 мл каждый.

Функции

1-дюймовый цифровой дисплей температуры высокой яркости, позволяющий отображать температуру до 0,1 °С.

Запираемая дверь с ключом для предотвращения открытия двери без разрешения.

Медная трубка с алюминиевым оребрением и высокоэффективный испаритель с воздушным охлаждением.


Звуковая и визуальная сигнализация с сигнализацией высокой/низкой температуры, сигналом сбоя питания, сигналом приоткрытой двери, сигналом сбоя питания и т. д.

Двухслойная стеклянная дверца с функцией автоматического размораживания обеспечивает однородность температуры.

Жесткая полиуретановая изоляция, не содержащая фреонов, чтобы избежать избыточного нагрева.

 Сопоставления

Характеристики

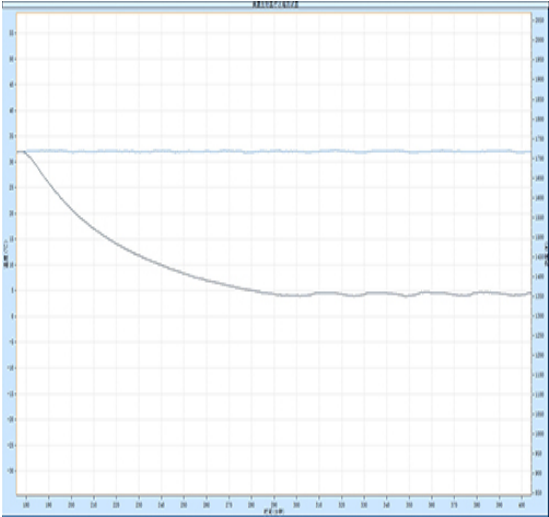

 Сфера применения

Холодильник для хранения для хранения крови Подходит для хранения цельной крови, тромбоцитов, эритроцитов, биологических продуктов, вакцин, лекарств, реагентов и т. д.;

Подходит для использования в банках крови, больницах, научно-исследовательских учреждениях, центрах профилактики и контроля заболеваний и т. д.

4°C Холодильник для хранения крови

Модель	XC-268L
Емкость (л)	268
Внутренний размер(Ш*Д*В) мм	530*490*1145
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	640*760*1856
Размер упаковки (Ш*Г*В) мм	700*760*2013
СЗ/ГВт (кг)	125/161
Описание	
Диапазон температур	2~6°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Климатический класс	H
Контроллер	Микропроцессор
Экран	Цифровой дисплей
Охлаждение	

Компрессор	1шт
Метод охлаждения	Воздушное охлаждение
Режим разморозки	автоматический
Хладагент	R134a
Толщина изоляции (мм)	П/Л/У/Ч: 54, Д:55
Материалы/конструкция	
Внешний материал	Холоднокатаный стальной лист
Внутренний материал	Нержавеющая сталь
Полки	5 (стальная решетчатая полка с покрытием)
Дверной замок с ключом	Да
Корзина крови	5
Порт доступа	1шт. Ø 25 мм
Ролики	4 (2 ролика с тормозом) + (2 регулируемые ножки)
Внутренняя дверь	2
Регистрация данных/интервал/ время записи	USB/запись каждые 10 минут/2 года
Дверь с обогревателем	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура, высокая температура окружающей среды
Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи
Система	Отказ датчика, Приоткрытая дверца, Перегрев конденсатора, Отказ встроенного регистратора данных USB, Ошибка связи
Аксессуары	
Стандарт	RS485, контакт удаленной сигнализации



Meling New Product 4°C Холодильник для хранения крови XC-630L

- Постоянная температура под интеллектуальным управлением
- Высокоэффективное охлаждение для безопасности крови
- 6 полок с покрытием погружением с полосками для этикеток
- Усовершенствованная конструкция воздушного охлаждения
- Магазин 360 пакетов 400 мл пакетов с кровью

Холодильник для хранения крови Meling 4°C XC-630L — это надежный холодильник для хранения крови, обеспечивающий безопасность цельной крови, плазмы крови, отсеков крови и образцов крови. Интеллектуальный постоянный контроль температуры обеспечивает

точность контроля температуры в пределах 2~6 °C внутри шкафа, что может гарантировать однородность температуры. Холодильник для хранения крови, оснащенный стеклянной дверцей с автоматическим размораживанием, обеспечивает безопасное хранение медицинских или лабораторных материалов.

Постоянная температура под интеллектуальным контролем

- Конструкция воздуховода обратного воздуха, обеспечивающая точность контроля температуры $\pm 1^{\circ}\text{C}$ внутри шкафа;
- Высокоточная компьютеризированная система контроля температуры, встроенные датчики температуры верхней/нижней зоны, температуры окружающей среды, температуры испарителя и контроля работы, обеспечивающие безопасную и стабильную работу.

Система безопасности

Совершенная система звуковой и визуальной сигнализации поставляется с функциями сигнализации для высокой температуры, низкой температуры, отказа датчика, приоткрытой двери, сбоя питания и т. д.

Высокоэффективное охлаждение · Усовершенствованная конструкция воздушного охлаждения, точный контроль температуры, обеспечение безопасности крови · Внутренний контейнер из нержавеющей стали, испаритель из медных труб, мощное охлаждение.

Система охлаждения

- Оборудован фирменным высокоэффективным компрессором, двигателем вентилятора EBM, обеспечивающим эффективную энергию и бесшумность;
- Высокоточная компьютеризированная система контроля температуры, встроенные датчики температуры верхней/нижней зоны, температуры окружающей среды, температуры испарителя и контроля работы, обеспечивающие безопасную и стабильную работу.

Автоматическая разморозка

- Конструкция возвратного воздуховода, обеспечивающая точность контроля температуры $\pm 1^{\circ}\text{C}$ внутри шкафа;
- Оснащен функцией автоматической разморозки, принудительной разморозки.

Гуманизированный дизайн

- Оборудован 5 полками для погружения с полосками для этикеток;
- 24 рамы для мешков с кровью, вмещающие 360 мешков с кровью по 400 мл каждый.

Функции

Цифровой дисплей температуры высокой яркости, позволяющий отображать температуру до 0,1 °C.

Запираемая дверь с ключом для предотвращения открытия двери без разрешения.

Медная трубка с алюминиевым оребрением и высокоэффективный испаритель с воздушным охлаждением.

Звуковая и визуальная сигнализация с сигнализацией высокой/низкой температуры, сигналом сбоя питания, сигналом приоткрытой двери, сигналом сбоя питания и т. д.

Двухслойная стеклянная дверца с функцией автоматического размораживания обеспечивает однородность температуры.
Жесткая полиуретановая изоляция, не содержащая фреонов, чтобы избежать избыточного нагрева.



Сфера применения


Кровь Кровяной холодильник подходит для хранения цельной крови, тромбоцитов, эритроцитов, биологических продуктов, вакцин, лекарств, реагентов и т. д.; Подходит для использования в банках крови, больницах, научно-исследовательских учреждениях, центрах профилактики и контроля заболеваний и т. д.

Характеристики

4°C Холодильник для хранения крови

Модель	XC-630L
Тип шкафа	Вертикальный
Емкость (л)	630
Внутренний размер(Ш*Д*В) мм	685*690*1373
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	812*912*1978
Размер упаковки (Ш*Г*В) мм	852*962*2131
СЗ (кг)	185
Описание	
Диапазон температур	2~6°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Климатический класс	H
Контроллер	Микропроцессор
Экран	Цифровой дисплей
Охлаждение	
Компрессор	1шт
Метод охлаждения	Воздушное охлаждение
Режим разморозки	автоматический
Хладагент	R290
Толщина изоляции (мм)	П/Л/У/Б:54,Д:55
Строительство	
Внешний материал	PCM
Внутренний материал	Нержавеющая сталь (дополнительно алюминиевая пластина с напылением)
Полки	6 (стальная проволочная полка с покрытием)
Дверной замок с ключом	Да
Корзина крови	24
Порт доступа	1шт. Ø 25 мм
Ролики	4 (2 ролика с тормозом)

Регистрация данных/интервал/ время записи	USB/запись каждые 10 минут / 2 года
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура
Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи
Система	Отказ датчика, Приоткрытая дверь, Перегрев конденсатора, Отказ встроенного USB-регистратора данных
Аксессуары	
Стандарт	Контакт дистанционной сигнализации, RS485
Параметры	Уставный регистратор



+4°C +22°C Контейнер Для Транспортировки Крови ХС-90W

- Двойная регулировка температуры, ЖК-дисплей
- Высокоточные датчики температуры
- Компрессор всемирно известного бренда
- Высокоэффективный вентилятор конденсации

Обзор

Компания Meling является ведущим китайским производителем холодильников для банков крови. Контейнер для транспортировки крови +4 °C +22 °C XC-90W представляет собой надежный холодильник для хранения крови, обеспечивающий безопасность цельной крови, плазмы крови, отсеков крови и образцов крови. Двойная регулировка температуры, ЖК-дисплей, легкое точное наблюдение за температурой внутри блока мониторинга, точность отображения температуры 0,1 °C. Высокоточные датчики температуры, модуль автоматического контроля температуры, поддержание точности контроля температуры в блоке до $\pm 0,1$ °C. Компрессор всемирно известного бренда, высокоэффективный вентилятор конденсации, общий уровень шума 47,6 децибел.

Постоянная температура под интеллектуальным управлением

· ЖК-дисплей, удобный для точного наблюдения за температурой внутри блока мониторинга, точность отображения температуры 0,1 °C

Система безопасности

Оснащен законченной звуковой и световой сигнализацией, сигнализацией высокой/низкой температуры, сигнализацией отказа датчика, сигналом неисправности источника питания, сигналом тревоги высокой температуры окружающей среды, интерфейсом внешнего оборудования сигнализации.

Система охлаждения

· Оборудован компрессором известной марки, высокоэффективным вентилятором конденсации, общий уровень шума 47,6 децибел, компрессор с питанием от сети переменного тока, соответствующими автомобильными аккумуляторами. Контроль температуры внутренней циркуляции с принудительным воздушным охлаждением, функция нагревательного провода, более безопасная и стабильная работа.

Гуманизированный дизайн

Достаточно большое пространство для хранения, обе стороны оснащены ручками, 4 подвижными роликами для легкого перемещения, а дверной замок может быть оборудован, чтобы гарантировать безопасность образцов.

Функции

Сфера применения

Холодильник для хранения для хранения крови Подходит для хранения цельной крови, тромбоцитов, эритроцитов, биологических продуктов, вакцин, лекарств, реагентов и т. д.; Подходит для использования в банках крови, больницах, научно-исследовательских учреждениях, центрах профилактики и контроля заболеваний и т. д.

Характеристики

4°C Холодильник для хранения крови

Модель	XC-90W
Типа	Ларь
Емкость (л)	90
Внутренний размер(Ш*Д*В) мм	516*365* 500
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	1080*565*856
Размер упаковки (Ш*Г*В) мм	1125*635*1061
СЗ/ГВт (кг)	75/92
Описание	
Настройка температуры	+4, +22
Диапазон температур	2~6°C/21~23°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Климатический класс	H
Контроллер	Микропроцессор
Экран	Цифровой дисплей
Охлаждение	
Компрессор	1шт
Метод охлаждения	Воздушное охлаждение
Хладагент	R134a
Толщина изоляции (мм)	100
Материалы/конструкция	
Внешний материал	ПЭВД
Внутренний материал	ПЭВД
Дверной замок с ключом	Да
Ролики	4
Дверь с обогревателем	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура, высокая температура окружающей среды
Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи
Система	Отказ датчика, Перегрев конденсатора, Отказ встроенного регистратора данных USB

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mgm@nt-rt.ru || сайт: <https://meling.nt-rt.ru/>